

Themenübersicht

Bein (rundgestrickt) 56 – 57

- bei Venenleiden

Bein (flachgestrickt) 58 – 63

- bei Lip- & Lymphödem

Arm (flachgestrickt) 64 – 66

- bei Lip- & Lymphödem

Ulcus cruris -

Kompressionstherapie 67

- bei Ulcus cruris

Narbenkompressions - kleidung 68 – 69

- Verbrennung & Verbrühung
- Ödemtherapie
- Plastische Chirurgie

Kompressionsversorgung Bein (rundgestrickt)

Rezeptaufbau:

Anzahl

- **1 oder 2 Paar** (2 Paar in 12 Monaten)
- **1 oder 2 Stück** (li. oder re.)

Strumpflänge

- **AD Kompressionsstrümpfe** (US lang)
- **AG Kompressionsstrümpfe** (OS lang)
- **AT Kompressionsstrumpfhose**

Kompressionsklasse

- **KKL I** – mittlere Varikose ohne Ödem, zur Vorbeugung bei stehenden Tätigkeiten und langen Reisen, während der Schwangerschaft
- **KKL II** – starke Varikose, mittleres Ödem, CVI nach Trauma, nach invasiven Therapien, Schwangerschaftsvarikose
- **KKL III** – nach Phlebothrombose, bei starkem Ödem, CVI, bei Ulcus cruris
- **KKL IV** – ausgeprägtes Ödem, Lymph-/ Lipödem

Befestigung

- **Haftrand**
- **Hüftbefestigung** (bei Silikonallergie)

nach Maß (ggf. Maßversorgung notwendig)

Bei **2 Stück/Paar** Kompressionsstrümpfen muss auf dem Rezept der Zusatz **„Wechselversorgung aus hyg. Gründen“** vermerkt sein.

Beispielverordnung: 2 Paar AG Kompressionsstrümpfe, KKL2, mit Haftrand, nach Maß, Wechselversorgung aus hyg. Gründen / Dg.: ...

Kompressionsversorgung Bein (rundgestrickt)



**AD Kompressions-
strümpfe, KKL ...,
nach Maß**



**AG Kompressions-
strümpfe, KKL ..., mit
Haftrand, nach Maß**



**Kompressions-
strumpfhose, KKL ...,
nach Maß**

Kompressionsversorgung Bein (flachgestrickt)

Rezeptaufbau:

Anzahl

- **1 Stück/Paar alle 6 Monate**
(vorzeitige Neuversorgung mit ärztlicher Begründung möglich, z. B. Verschleiß, Umfangsveränderung, Rezeptvermerk: Wechselsversorgung aus hyg. Gründen)

flachgestrickte/r

Strumpflänge

- **AD Kompressionsstrümpfe** (US lang)
- **AG Kompressionsstrümpfe** (OS lang)
- **AT Kompressionsstrumpfhose**

Kompressionsklasse

- **KKL I** – leicht
- **KKL II** – mittel
- **KKL III** – kräftig
- **KKL IV** – sehr kräftig

Befestigung

- **Haftrand**
- **Hüftbefestigung** (bei Silikonallergie)

Zusätze (S. 60-61)

nach Maß

Beispielverordnung: 1 Paar flachgestrickte AG Kompressionsstrümpfe, KKL 2, mit Haftrand, nach Maß, + Zusätze (S. 60-61)

Dg.: ...

Strumpflänge



**Flachgestrickte AD
Kompressionsstrümpfe,
KKL ..., Zusätze (S. 60-61),
nach Maß**



**Flachgestrickte AG
Kompressionsstrümpfe,
KKL ..., Zusätze (S. 60-61),
mit Hafrand, nach Maß**



**Flachgestrickte AT
Kompressionsstrumpfhose,
KKL ..., Zusätze (S. 60-61),
nach Maß**

Kompressionsversorgung Bein (flachgestrickt)

Häufige Zusätze

Mit Fußspitze

- verhindert ein Verrutschen
- verhindert ein Einschnüren am Ballen

Schräger Ballenansatz

- erhöhter Tragekomfort, anat. Passform

Y-Einkehre/T-Fersen

- weniger Faltenbildung im Spannbereich
- bessere Beweglichkeit des Fußes

Schräger Abschluss bei AD Versorgung

- anatomische Passform, vermeidet zirkuläre Abschnürung
- verbesserter Lymphabfluss

Haftrand bei AD Versorgung

- bei konischen Beinformen, vermeidet ein Rutschen

Knieeinkehre/Knie-Ellipse/Kniekomfortzone

- weniger Faltenbildung bei Kniebeugung
- Entlastung der Kniekehle bei Rollstuhlfahrern und häufig sitzenden Tätigkeiten
- bei empfindlichen Kniekehlen, z.B. bei starkem Schwitzen, Rötungen und Hautirritationen

Haftrandstopper im Oberschenkelbereich

- zusätzlicher Halt bei sehr weichem Bindegewebe

Kompressionsversorgung Bein (flachgestrickt)

Häufige Zusätze

Slipform/schräger Abschluss am Oberschenkel

- anat. Passform, vermeidet zirkuläre Abschnürung
- verbesserter Lymphabfluss

Oberbeinerhöhung

- physiologischer Druckverlauf bis in die Leiste
- Verhinderungen von Weichteilwülsten am OS
- bei weichem Gewebe und starken OS-Ödemen

Hafrand bei AG Versorgung

- Befestigung des Strumpfes

Hüftbefestigung

- Befestigung des Strumpfes bei Silikonallergie

Slipform/Kastenform bei AT Versorgung

- Vermeidung von zirkulärer Abschnürung
- anatomische Passform, gewährleistet den erforderlichen Druckauslauf im Übergang vom Oberschenkel zu Leibteil

Offener Schritt

Mit Eingriff (Herrenhose)

Stomaöffnung

Nach der Befundung durch geschultes Fachpersonal sind eventuell weitere Zusätze erforderlich.

Kompressionsversorgung Bein (flachgestrickt)

Zweiteilige

Beinversorgungsmöglichkeiten

(für leichteres Anziehen der Kompressionsversorgung)

Zehenkappe

- bei offener Fußspitze
- Kompressionsversorgung der einzelnen Zehen

Caprihose

- bei AD Versorgungen

Bermuda oder Radler

- bei AG Versorgungen

Einteilige Sonderversorgung

Leggings

- bei Lipödem ohne Ödemneigung am Fuß

Info

Patienten dürfen nur mit rezeptierten Zusätzen versorgt werden.

Erforderliche Rezeptänderungen bitten wir, zu entschuldigen.

Beinversorgungsmöglichkeiten



Zehenkappe

(bei offener Fußspitze)



Caprihose

(bei AD Versorgung)



Bermuda oder Radler

(bei AG Versorgung)



Leggings

(bei Lipödem, ohne
Ödemneigung am Fuß)

Kompressionsversorgung **Arm (flachgestrickt)**

Rezeptaufbau:

Anzahl

- **1 Stück/Paar alle 6 Monate**
(vorzeitige Neuversorgung mit ärztlicher Begründung möglich, z. B. Verschleiß, Umfangsveränderung, Rezeptvermerk: Wechselsversorgung aus hyg. Gründen)

flachgestrickte/r

Variationen

- **Handschuh**
- **Armstrumpf**
- **Handschuh und Armstrumpf einteilig**
- **Handschuh und Armstrumpf zweiteilig**
- **Bolero (bei doppelseitiger Versorgung)**

Kompressionsklasse

- **KKL I – leicht**
- **KKL II – mittel**
- **KKL III – kräftig**

Befestigung

- **Haftrand**
- **Schultergurt**
- **Schulterklappe (Befestigung am BH)**

nach Maß

Beispielverordnung: 1 flachgestrickter Armkompressionsstrumpf, KKL 2, mit Haftrand, nach Maß, + Zusätze (S. 65), zusammen zu tragen mit 1 flachgestrickten Handschuh, KKL 2, nach Maß

Kompressionsversorgung Arm (flachgestrickt)

Zusätze (Arm- & Handversorgung)

Offene Finger

- bessere Handfunktionalität

Funktionszone Ellenbogen/vermehrte Einkehren bei E

- bei empfindlichen Ellenbeugen, z.B. bei starkem Schwitzen, Rötungen & Hautirritationen
- verminderte Faltenbildungen und zirkuläre Einschnürungen
- verbesserte Gelenkfunktionalität

Schräger Abschluss

- anatomische Passform, vermeidet zirkuläre Abschnürung


Info

Zweiteilige Versorgungen ermöglichen ein leichteres Anziehen.

Patienten dürfen nur mit rezeptierten Zusätzen versorgt werden.

Erforderliche Rezeptänderungen bitten wir, zu entschuldigen.

Variationsbeispiele

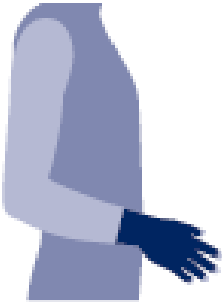

**1 flachgestrickter
Handschuh, KKL 2, nach
Maß**



**1 flachgestrickter
Armkompressionsstrumpf
KKL 2, mit Haftrand, nach
Maß, Zusätze (S. 65)**



**1 flachgestrickter
Armkompressionsstrumpf
mit Handschuh, einteilig,
KKL 2, mit Haftrand,
nach Maß, Zusätze (S. 65)**

Kompressionsversorgung bei Ulcus cruris

Rezeptaufbau:

Anzahl

- 1 oder 2 Sets (li./re.)

Ulcus cruris Kompressionstherapie-Set/s

- Set = 1 Kompressionsstrumpf AD
und 2 Unterziehstrümpfe

KKL 3

- Kompressionsklasse

Mit oder ohne Reißverschluss

- zum leichteren Anziehen wird ein Reißverschluss empfohlen.

nach Maß

Bei 2 Sets muss auf dem Rezept der Zusatz „**Wechselversorgung aus hyg. Gründen**“ vermerkt sein.

Beispielverordnung: 1 Kompressionsstrumpfset bei Ulcus Cruris, KKL 3, nach Maß, mit Reißverschluss, links

Dg.: ...



Kompressionsversorgung


Narbenkompressionskleidung

- Narbentherapie nach Transplantationen
- thermische/chemische/elektrische Verletzungen
- andere tiefe Schädigungen der Haut

Die Kompression fördert die geordnete Kollagenbildung im Narbengewebe und beugt so Wucherungen, Keloide und Narbenkontrakturen vor.

Therapie

- vermindert die Durchblutung der Narbe
- hilft, den Juckreiz zu lindern
- sorgt für die parallele Anordnung der Kollagenfasern und somit für eine flache und schnelle Ausheilung der Haut
- vermindert die Ödemneigung und beschleunigt den Abbau von Ödemen

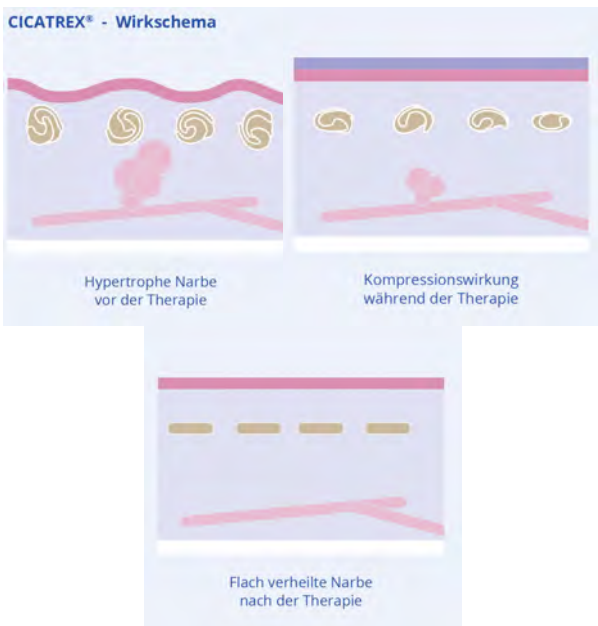

Kompressionsversorgung

Narbenkompressionskleidung

Beispielversorgungen

Kopf



Oberkörper



Hand/Arm



Bein



Bildquellenverzeichnis

Wir danken den Firmen und Instituten für ihre Mithilfe bei der Beschaffung von Informationen und Bildvorlagen.

Titelbild

Bauerfeind AG (Genu Train & Einlagen)

Otto Bock Health Care Deutschland GmbH (Beinprothese)

S. 4 Bort GmbH (BORT StabiloNec Eco) Thuasne (Ortel T-Neck Plus)

S. 5 Bort GmbH (BORT Clavicula-Bandage)

S. 6 Bort GmbH (BORT OmoBasic & Bort OmoARS)

S. 7 SPORLASTIC GmbH (NEURO-LUX II) Bauerfeind AG (Omo Train)

S. 8 Bauerfeind AG (EpiTrain & EpiPoint)

S. 9 Bort GmbH (BORT KubiTal & Bort KubiFX lang light)

S.10 Bort GmbH (BORT Ellenbogen ROM-Orthese)

S.11 Bauerfeind AG (ManuTrain & ManuLoc)

S.12 Bauerfeind AG (ManuLoc Rhizo) Schiebler (Para Carpal offen)

S.13 Bort GmbH (DigiSoft-Fingerorthese) Bauerfeind (RhizoLoc)

**S.14 Pro Walk Rehabilitationshilfen und Sanitätsbedarf GmbH
(Saebo Stretch) Sporlastic GmbH (MANU-HIT Air)**

**S.15 Pro Walk Rehabilitationshilfen und Sanitätsbedarf GmbH
(Saebo Glove) Juzo – Julius Zorn GmbH (Juzo Pro Digitus Xtec)**

S.16 Bort GmbH (BORT MobiDig Extension & Stack'sche Schiene)

S.17 Bauerfeind AG (LumboTrain & LumboLoc Forte)

**S.18 Bauerfeind AG (Spinova Osteo) Otto Bock Health Care
Deutschland GmbH (Dorso Arexa)**

**S.19 THUASNE DEUTSCHLAND GmbH (Lombamum)
Bauerfeind AG (SacroLoc)**

S.20 Bort GmbH (BORT Elastischer Rippengürtel für Herren)

**S.21 Bort GmbH (BORT PostOban Thorax-Abdominal-Stütze &
BORT Narbenbruch-Bandage)**

S.22 Bort GmbH (BORT Nabelbruch-Bandage & Stoma-Bandage)

**S.23 Otto Bock Health Care Deutschland GmbH (Tübinger
Hüftbeugeschiene) Bauerfeind AG (CoxaTrain)**

S.24 Bauerfeind AG (SofTec Coxa)

Bort GmbH (BORT StabiloHip Hüftprotektor)

**S.25 Bort GmbH (BORT HerniaFix Federbruchband mit runder
Pelotte & BORT HerniaFix Federbruchband mit anat. Pelotte)**

**S.26 Bort GmbH (BORT HerniaFix Elastisches Federbruchband
doppelseitig & BORT Codyn Sitzkissen)**

**S.27 Bort GmbH (BORT MyoActive Sport Oberschenkelstütze)
Bauerfeind AG (Genu Train)**

**S.28 Bort GmbH (BORT Asymmetric & BORT Osgood-Schlatter
Kniegelenkbandage)**

S.29 Bauerfeind AG (GenuPoint & GenuTrain S)

S.30 Bauerfeind AG (SecuTec Genu)

Bort GmbH (BORT Immob-Schiene einstellbar)

S.31 Bort GmbH (BORT Immob-Schiene mit Patella-Aussparung)

Bildquellenverzeichnis

- S.32 Bauerfeind AG (SecuTec OA & GenuTrain OA)
- S.33 Otto Bock Health Care Deutschland GmbH (Agilum Freestep Classic – Varus Version) albrecht GmbH (Jack PCL Schiene)
- S.34 ORMED GmbH (PLAYMAKER EVEREST)
- S.35 Bauerfeind AG (MalleoLoc L & Malleo Loc L3)
- S.36 Bauerfeind AG (MalleoTrain & AchilloTrain)
- S.37 Bort GmbH (BORT Air Walker lang & BORT Air Walker kurz)
- S.38 Bort GmbH (BORT Air Walker Achillo)
Otto Bock Health Care Deutschland GmbH
(Fersenentlastungsorthese nach Dr. Settner / OMM Münch)
- S.39 SPORLASTIC GmbH (FOOT-UP & NEURODYN COMFORT)
- S.40 Basko Orthopädie Handelsgesellschaft mbH (Toe off)
HELLER MEDIZINTECHNIK GmbH & Co. KG (innoSTEP-WL)
- S.41 ORMED GmbH (PROCARE PLANTAR FASCIITIS NIGHT SPLINT)
DARCO (Europe) GmbH (Body Armor Night Splint)
- S.42 Bort GmbH (BORT Vorfußentlastungsschuh &
BORT Fersenentlastungsschuh)
- S.43 Bort GmbH (BORT Verbandschuh offene Form &
BORT Verbandschuh Comfort)
- S.44 Bort GmbH (BORT Diabetiker-Verbandschuh)
schein orthopädie service KG (Lucro-Diabetiker Schutzschuh)
- S.45 Bauerfeind AG (ValguLoc II)
Bort GmbH (BORT Metatarsal-Bandage mit Pelotte)
- S.46 Bort GmbH (BORT Verkürzungsausgleich aus Silikon &
BORT Silikon-Fersenspornpolser mit SoftSpot)
- S.47 Bort GmbH (PediSoft Silikon & Gel)
- S.53 footpower Service GmbH (sensomotorische Einlagen)
- S.54 schein orthopädie service KG (Lucro-Diabetiker Schutzschuh)
- S.57 Bauerfeind AG
- S.59/63/66 BSN-JOBST GmbH
- S.67 BSN-JOBST GmbH (UlcerCare mit und ohne Reißverschluss)
- S.68/69 THUASNE DEUTSCHLAND GmbH (CICATREX)
- S.70 Ossenberg GmbH (UA-Gehstütze & Achselstütze)
- S.71 Ossenberg GmbH (Arthritisgehhilfe & Handstock)
- S.72 Ossenberg GmbH (Vierpunktgehhilfe & Spikes)
- S.73 Sundo Homecare GmbH
(Strumpf- & Kompressionsstrumpfanziehhilfe)
- S.74 RUSSKA Ludwig Bertram GmbH (Toilettensitzerhöhung)
Bort GmbH (BORT Codyn Sitzkissen)
- S.75/76/77 THUASNE DEUTSCHLAND GmbH (SILIMA)
- S.78 Otto Bock Health Care Deutschland GmbH
- S.79 Otto Bock Health Care Deutschland GmbH
- S.80 FIOR & GENTZ Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb von
orthopädietechnischen Systemen mbH
- S.81 Otto Bock Health Care Deutschland GmbH (SAFO)
- S.82 FIOR & GENTZ GmbH (NeuroSwing Knöchelgelenk)
HELLER MEDIZINTECHNIK GmbH & Co. KG (innoSTEP-WL)
- S.83 SPORLASTIC GmbH (NEURO-LUX II)
Pro Walk GmbH (Saebo Stretch)

Impressum

Herausgeber:

Wortmann & Beyle Sanitätshaus

Hilfsmittelkatalog erstellt von:

Frank Grosser

(Orthopädietechniker-Meister)

Quellen:

Herstellerkataloge

Verzeichnis Seite 84–85

Stammhaus

Wortmann & Beyle Sanitätshaus

Dorotheenstr. 1

25451 Quickborn

Telefon: 04106 / 808890

Telefax: 04106 / 8088919

info@sanitaetshaus-wortmann-beyle.de

www.wortmann-beyle-sanitaetshaus.de

Informationen & Hinweise

Stand Juli 2022

Für Hilfsmittelverordnungen gilt:

- Keine Budgetierung
- 10 % Zuzahlung für den Patienten (mind. 5 €, maximal 10 €)
- zuzahlungsfrei für Kinder bis 18 J.
- zuzahlungsfrei für Schwangere, wenn die Versorgung aufgrund der Schwangerschaft erforderlich ist (Rezeptvermerk: Gravidität)
- keine gesetzl. Zuzahlung bei BG-Versicherten
- Einige Kassenerstattungsverträge sehen neben der gesetzlichen Zuzahlung auch die Möglichkeit einer Aufzahlung durch den Versicherten vor, z. B. für höherwertige Produkte, bestimmte Marken.

